

witt
PERSONAL CARE

Super Hit™ Master

Powered by FITTOP

NL



INHOUD

I	BELANGRIJKE INFORMATIE	3
II	STRUCTUUR VAN PRODUCT	6
III	SPECIFICATIES	7
IV	OPLADEN	8
V	BEDIENING.....	8
VI	ONDERHOUD, SCHOONMAKEN	10
VII	5 MASSAGEKOPPEN.....	11
VIII	GARANTIE	19

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

Om het risico op functiefouten, elektrische schokken, letsel, brand, overlijden en materiaalschade te verminderen moeten alle instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding van het Witt Super Hit™ Master-massagepistool vóór gebruik worden doorgelezen.

Niet gebruiken

1. In het geval van spierschade dient u contact op te nemen met uw arts voordat u het Witt Super Hit™ Master-massagepistool gebruikt. Minderjarigen mogen het Witt Super Hit™ Master-massagepistool uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
2. Gebruik dit apparaat niet op vochtige of beschadigde huid. Het kan worden gebruikt op kleding. Voorzichtig aandrukken en ongeveer 60 seconden op elk gebied bewegen.
3. Gebruik dit apparaat niet op de nek, knokkels en lichaamsdelen met weinig spieren. Uitsluitend gebruiken op de zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of onbehagen te veroorzaken.
4. Gebruik het apparaat niet bij blauwe plekken, pijn of onbehagen.
5. Geen onderdelen in de ventilatie-openingen in het apparaat plaatsen.
6. Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water door de ventilatie-openingen komt.
7. Het apparaat mag niet in de buurt van vuur of bronnen van hitte komen.
8. Verlies het apparaat niet en gebruik het niet met opzet verkeerd.

9. Gebruik geen andere opladers om het Witt Super Hit™ Master-massagepistool op te laden. Het apparaat moet worden opgeladen met de meegeleverde oplader.
10. Het apparaat mag niet uit elkaar worden genomen.
11. Houd vingers, haren en andere delen van het lichaam weg van de as en de achterkant van de massagekop. Dit kan letsel veroorzaken.



Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het Witt Super Hit™ Master-massagepistool zonder dat de massagekop is bevestigd.



Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het Witt Super Hit™ Master-massagepistool wanneer de massagekop is bevestigd.

Waarschuwingen en herinneringen

1. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en bronnen van hitte. Houd de ventilatie-openingen vrij van stof en vuil.
2. Trek de oplader uit het apparaat wanneer het is opgeladen.
3. Het Witt Super Hit™ Master-massagepistool kan tijdens het laden niet worden gebruikt.
4. Gebruik dit apparaat volgens de instructies in deze handleiding.

5. Controleer nauwkeurig of het apparaat normaal kan worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID


GEBRUIK IN DE VOLGENDE GEVALLEN HET APPARAAT NIET ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS (deze instructie betekent niet dat u het apparaat niet kunt gebruiken, maar wij raden aan om eerst een arts te raadplegen):

zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathologie of netvliesschade, gebruik van een pacemaker, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylitis, spierpijn in de rug of een stijve rug, recente chirurgische ingreep of spiraal, metalen stiften of platen of overige ernstige problemen in verband met uw gezondheid.



- Stille motortechniek zorgt voor een dynamische krachtbalans en daardoor een geluidsarme massage.
- De siliconemassagekoppen zorgen voor een comfortabele massage en verminderen de kans op schade aan de botten.
- Oplaadbare lithiumbatterij.
- Compact handvat met comfortabele greep.
- Draadloos en lichtgewicht.
- Zweet- en vochtwerend materiaal.
- De ingebouwde batterij en het ergonomische design zorgen voor een goede greep.

Witt Super Hit™ Master-massagepistool met 5 verschillende massagekoppen

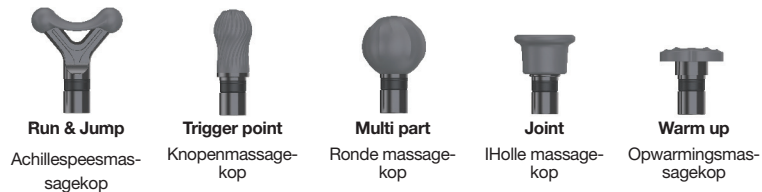

Bevestiging van massagekoppen:

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. U bevestigt de gewenste massagekop door de massagekop iets naar binnen te drukken en tegelijkertijd te draaien. Verwijder de massagekop door er lichtjes aan te draaien terwijl u het voorzichtig uitneemt. Kies de massagekop voor de prettigste massage.





Specificaties

Productnaam: Witt Super Hit Master	Voedingsadapter: DC, 29V=1A
Productmodel: WSHMASTER	Vermogen: ca. 1000mA
Afmetingen: 148,5 x 63 x 253,5 mm	Timer: wordt na 15 m gebruik automatisch uitgeschakeld
Gewicht: ca. 0,9 kg	Massagekoppen: 5 verschillende massagekoppen
Productmodel: 29V	Instellingen: INTELLIGENT, HANDMATIG (staploze snelheidsbediening)

Opladen

1. Laad de batterij op voordat u het product in gebruik neemt. (Als het apparaat voldoende is opgeladen, is dit niet nodig.)
2. Steek de meegeleverde adapterstekker van Fittop in het stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de poort van de batterijlader onder op het handvat.
3. Batterij-indicator: batterijniveau < 25% (rood lampje knippert), batterijniveau < 50% (geel lampje knippert), batterijniveau < 75% (blauw lampje knippert), batterijniveau > 75% (groen lampje knippert), batterijniveau 100% (als het opladen is voltooid en de batterij volledig opgeladen is, brandt een groen lampje voortdurend).
4. 4.Schakel het Witt Super Hit™ Master-massagepistool niet tijdens het laden in.


Bediening

1. Druk kort op de aan/uit-knop  en vervolgens kort op de instelknop  om percussie/sterkte te starten..
2. Als u over wilt gaan naar HANDMATIGE instelling,  i 3 sekonder. moet u de instelknop 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens kunt u de snelheid handmatig aanpassen door de instelknop ingedrukt te houden.
3. Het Witt Super Hit™ Master-massagepistool stopt na 15 minuten voortdurend gebruik en gaat over op stand-by. Als u het apparaat opnieuw wilt starten, drukt u op de instelknop .

Spraakbedieningsfunctie: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, start de spraakbedieningsfunctie automatisch. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop  ingedrukt tot u twee geluidssignalen hoort om de spraakbedieningsfunctie uit te schakelen. Als de spraakbedieningsfunctie is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop  ingedrukt om de functie opnieuw te starten tot een geluidssignaal aangeeft dat de functie is ingeschakeld. Wanneer het


batterijniveau in de spraakbedieningsfunctie lager is dan 25%, hoort u het bericht "low battery, please charge in time". (Let op: Wanneer de spraakbedieningsfunctie is uitgeschakeld, kan het apparaat nog steeds een laag batterijniveau aangeven.)


Schakelen tussen instellingen:

1) Modus INTELLIGENT: druk kort op de instelknop  om het apparaat te starten. Het product is standaard ingesteld op de modus INTELLIGENT. De nabijheidssensor, botherkenningsensor en massekopherkenningsfunctie werken in de modus INTELLIGENT.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, herkent het de massagekop automatisch en wordt automatisch een lagere snelheid ingesteld tot de massagekop dicht bij het lichaam komt.

Als de massagekop dicht bij het lichaam is, gaat de Witt Super Hit™ Master automatisch over op nominale snelheid, die aangepast is aan de gekozen massagekop. Als er geen massagekop geregistreerd is, wordt de Witt Super Hit™ Master binnen 5 seconden uitgeschakeld.

2) Modus HANDMATIG: Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop en houd de instelknop  een paar seconden ingedrukt. Het apparaat gaat dan automatisch over op de modus HANDMATIG. De nabijheidssensor, botherkenningsensor en massekopherkenningsfunctie zijn uitgeschakeld.

In de modus HANDMATIG kunt u de snelheid handmatig bedienen. Als u de instelknop  ingedrukt houdt, verhoogt de Witt Super Hit™ Master de snelheid tot de knop wordt losgelaten of tot de hoogst mogelijke snelheid is ingesteld.

Druk kort op de instelknop om het apparaat uit te schakelen.

Batterijniveau:

Batterijniveau 75~100% (4 streepjes en vermogenslampje groen)

Batterijniveau 50~75% (3 streepjes en vermogenslampje blauw)

Batterijniveau 25~50% (2 streepjes en vermogenslampje geel)

Batterijniveau 5~25% (1 streepje en vermogenslampje rood)

Batterijniveau < 5% (symbool voor batterij leeg brandt en vermogenslampje knippert rood)

Onderhoud, schoonmaken, opslag en transport

1. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken en droog na met een zachte doek.
2. Bewaar het apparaat in de meegeleverde bewaartas, ook op reis.
3. Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plek.
4. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet het na het schoonmaken worden bewaard in de originele verpakking en om de zes maanden worden opgeladen.
5. Dit apparaat is geschikt voor gebruik in de auto, in de trein, op de boot en in het vliegtuig.
6. Dit apparaat moet tijdens transport worden vastgezet om trillingen, botsingen, rollen en vallen te voorkomen.

5 massagekoppen

Intelligente technologie 1

Intelligente massagekoppen -percussion (sterkte)

De Witt Super Hit™ Master is intelligent en herkent spierweefsel.

Wanneer de verschillende massagekoppen op het apparaat worden bevestigd, identificeert en configureert het systeem automatisch de bijbehorende sterkte, intensiteit en amplitude.

Exacte configuratie van de sterkte voor verschillende spierzones is uiteraard niet nodig.



Intelligente technologie 2

Intelligente spraakbediening

In plaats van de gebruikelijke 'stomme' functie heeft de Witt Super Hit™ Master een praktische en onmiddellijke spraakbediening.

Wanneer de verschillende massagekoppen gaat het systeem automatisch over op de bijbehorende sterkte en spraakbediening.

Als u bijvoorbeeld de ronde Multi Part-massagekop plaatst, gaat het systeem automatisch over op multi-zone-ontspanningsmodus en hoort u het bericht: "General mode suitable for all muscle fasciaparts." (Algemene modus geschikt voor alle spiertypen en weefsels.)

U kunt de spraakbediening op elk moment in- of uitschakelen. Als het apparaat is ingeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om de spraakbediening uit te schakelen, totdat twee piepsignalen aangeven dat spraakbediening is uitgeschakeld.

Wanneer de spraakbediening is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om de functie opnieuw te starten, totdat twee piepsignalen aangeven dat spraakbediening is ingeschakeld.

"General mode suitable for all muscle fascia parts."



Intelligente technologie 3

Visueel intelligent interface

In tegenstelling tot gebruikelijke apparaten heeft de Witt Super Hit™ Master een unieke, gebruiksvriendelijke interface met duidelijke iconen:

- Percussion/sterkte (INTELLIGENT, HANDMATIG)
- Massagekop-iconen (Multi part, joint massage, Run & Jump, Warm up, Trigger point)
- Massagezones (verschillende lichaamsdelen knippen)••
Aftelling (15 minuten / stand-by / digitale klok)
- Batterijniveau (batterijsymbool met 4 streepjes)
- Snelheid (groene en rode indicatoren in een cirkel)

De ontwerpers van Fittop hebben een gebruiksvriendelijke interface ontwikkeld die ervoor zorgt dat het Witt Super Hit™ Master-massagepistool eenvoudig te gebruiken is.



Intelligente technologie 4

Intelligente herkenning van spieren en botten

In plaats van de traditionele harde massage herkent de Witt Super Hit™ Master automatisch spieren en botten, waardoor ze beter beschermd blijven.

Wanneer het apparaat een bot herkent, vermindert het systeem onmiddellijk de frequentie en het effect om de botten te beschermen tegen onbedoelde schade.

De massage is hierdoor prettiger en veiliger.



Intelligente technologie 5

Intelligente stroombesparing

In tegenstelling tot traditionele massageapparaten bevat de Witt Super Hit™ Master stroombesparende technologie.

Wanneer het massagepistool het lichaam niet aanraakt, gaat het automatisch over op stand-by.

Intelligente stroombesparing verlengt de levensduur van de batterij en het product.





Anders dan traditionele apparaten

De Witt Super Hit™ Master heeft vijf massagekoppen die ontworpen zijn om tegemoet te komen aan al uw behoeftes.

Multi part-massagekop (algemeen)

Maximum RPM: 3500

Uniek design met golfstructuren voor betere stimulering van bindweefsel. Geschikt voor verschillende spiergroepen.

Audibericht

General mode suitable for all muscle fascia parts.



Warm-upmassagekop

Maximum RPM: 3150

Door de spieren met beperkte bewegingen te activeren worden de spieren sneller gestimuleerd en opgewarmd.

Audibericht

Warm-up mode for quick entering into motion state.



Joint-massagekop

Maximum RPM: 2275

Kenmerkend hol ontwerp voor zachte en beschermende massage van ledematen en ruggenwervel.

Audibericht

Joint massage mode to relieve pain around knee, elbow joint and lumbar vertebrae after exercise.



Trigger point-massagekop

Maximum RPM: 2975

Kenmerkend spiraaldesign voor diepere massage van knopen, die een voor een worden weggenomen.



Audiobericht

Dedicated Trigger points release mode for whole body trigger points relieving.

Achillespeesmassagekop

Maximum RPM: 2625

Uniek bionisch v-vormig design voor het masseren van de achillespees en de rug. Aanbevolen door sporters en masseurs.



Audiobericht

Uniek design voor het masseren van de achillespees en de rug. Aanbevolen door sporters en masseurs.

Garantie

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen, werkuren en transport. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegden
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (klinieken, fysiotherapeuten, masseurs enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht.

Onder voorbehoud van zetfouten.

WAARSCHUWING: De Witt Super Hit™ Master en de Witt Super Hit™ Mini zijn niet ontworpen of bedoeld om te worden gebruikt als medische apparatuur of als vervanging daarvan. De producten zijn niet bedoeld voor het voorkomen, diagnosticeren of behandelen van ziektes of aandoeningen, ook niet bij gebruik volgens de aanwijzingen. De producten vormen geen medische apparatuur en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren van ziektes of overige aandoeningen, en evenmin voor het genezen, verzachten, behandelen of voorkomen van ziekte. Neem bij eventuele medische vragen altijd contact op met een arts.

De massagepistolen Witt Super Hit™ Master en Witt Super Hit™ Mini zijn bedoeld voor het verminderen van lichamelijke stress en pijn door zacht weefsel in het lichaam te manipuleren. Neem bij medische vragen altijd onmiddellijk contact op met een arts.