



Super HitTM Mini

Small size and strong power

Powered by **FITTOP**

WSHMINI

FR



TABLE DES MATIÈRES

I	INFORMATIONS IMPORTANTES.....	4
II	PRÉSENTATION DU PRODUIT	7
III	CARACTÉRISTIQUES.....	8
IV	RECHARGE.....	9
V	UTILISATION.....	9
VI	ENTRETIEN, NETTOYAGE, RANGEMENT ET TRANSPORT .	10
VII	TÊTES DE MASSAGE	11
VIII	GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	13

Informations importantes

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, d'électrocution, de blessure personnelle, d'incendie, de décès et de dommage matériel, veuillez lire l'ensemble des instructions et avertissements du mode d'emploi du Masseur Super Hit™ Mini de Witt avant utilisation.

Ne pas utiliser dans les cas suivants

1. En cas de blessure musculaire, veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser le masseur Super Hit™ Mini de Witt. Les mineurs peuvent utiliser le masseur Super Hit™ Mini de Witt uniquement sous la surveillance d'un adulte.
2. N'utilisez pas l'appareil sur une peau humide ou sale. L'appareil peut être utilisé sur les vêtements, en faisant attention à ne pas exercer trop de pression et à ne pas dépasser plus de 60 secondes d'utilisation sur une zone.
3. N'utilisez pas l'appareil sur le cou, les os et sur les parties du corps avec une faible couverture musculaire. Utilisez l'appareil uniquement sur les tissus mous du corps en évitant de provoquer une douleur ou un inconfort.
4. N'utilisez pas l'appareil en cas d'hématome, de douleur ou d'inconfort.
5. N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
6. N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais pénétrer d'eau dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.

7. L'appareil ne doit pas être placé dans un feu ou à proximité de sources de chaleur.
8. Ne laissez pas l'appareil tomber volontairement. N'utilisez pas intentionnellement l'appareil d'une mauvaise manière.
9. Ne démontez pas l'appareil.
10. Tenez vos doigts, cheveux et autres parties du corps éloignés de l'axe et de l'arrière de la tête de massage, car cela pourrait provoquer des blessures.



Ne touchez pas cette partie lorsque vous démarrez le masseur Super Hit™ Mini de Witt si la tête de massage n'est pas installée.



Ne touchez pas cette partie lorsque vous démarrez le masseur Super Hit™ Mini de Witt si la tête de massage est installée.

Avertissements et rappels

1. Tenez l'appareil éloigné des liquides ou sources de chaleur. Nettoyez la poussière et les saletés sur les ouvertures de ventilation.
2. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur.
3. Le masseur Super Hit™ Mini de Witt ne peut pas être utilisé pendant la charge.
4. Utilisez l'appareil conformément aux consignes du présent mode d'emploi.


5. Vérifiez soigneusement si l'appareil peut être utilisé normalement, conformément aux instructions du présent mode d'emploi.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE VOTRE MÉDECIN SI L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES

S'APPLIQUE (ces mentions ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, mais nous vous conseillons de consulter un médecin au préalable) :

Grossesse, diabète avec complications comme une neuropathologie ou des lésions rétinienne, utilisation d'un stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, spondylarthrite, douleurs dorsales ou raideur de la colonne vertébrale, intervention chirurgicale récente ou stérilet, broche ou plaque métallique et autres problèmes graves de santé.

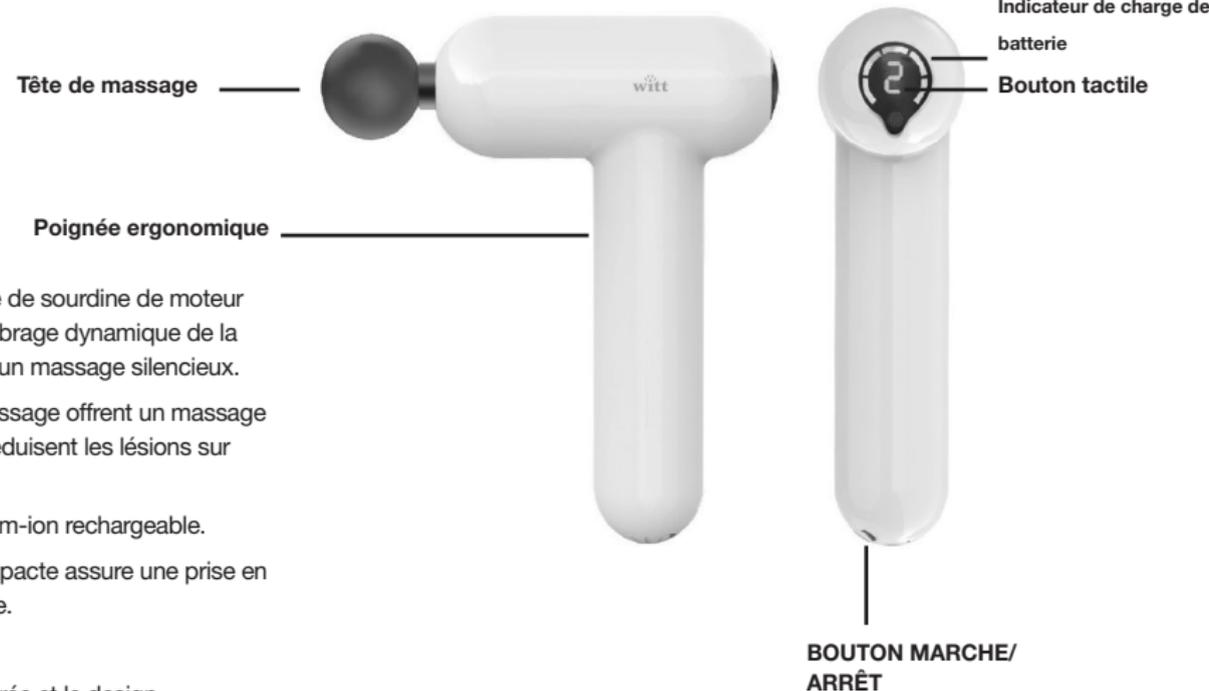

- Une technologie de sourdine de moteur permet un équilibrage dynamique de la puissance pour un massage silencieux.
- Les têtes de massage offrent un massage confortable et réduisent les lésions sur les os.
- Batterie au lithium-ion rechargeable.
- La poignée compacte assure une prise en main confortable.
- Écran tactile
- La batterie intégrée et le design ergonomique offrent une bonne prise en main.

Masseur Super Hit™ Mini de Witt avec 3 têtes de massage



Multi part

Mini tête de massage ronde

Points de déclenchement

Mini tête de massage pour points de déclenchement

Courir et Sauter

Mini tête de massage pour talons d'Achille

Installation de la tête de massage : Assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour installer la tête de massage souhaitée, appuyez doucement sur la tête de massage vers l'intérieur tout en la tournant légèrement. Pour désinstaller la tête de massage, tournez-la légèrement tout en la tirant doucement vers l'extérieur. Choisissez la tête de massage adaptée pour un massage confortable.

Caractéristiques

Nom du produit : Super Hit Mini de Witt	Tension nominale : 5 V
Modèle : WSHMINI	Puissance : env. 2000 mA
Poids : env. 0,6 kg	Têtes de massage : 3 têtes de massage différentes
Alimentation : batterie au lithium rechargeable	Programmes : 5 vitesses, réglage manuel de la vitesse

Recharge

1. Rechargez la batterie avant utilisation (si l'appareil est déjà rechargé, il n'est pas nécessaire de le charger).
2. Branchez l'extrémité ronde du câble sur l'appareil et rechargez l'appareil par USB.
3. Voyant de la batterie : niveau de charge de la batterie <25 % (voyant rouge clignotant), niveau de charge de la batterie <50 % (voyant jaune clignotant), niveau de charge de la batterie <75 % (voyant bleu clignotant), niveau de charge de la batterie >75 % (voyant vert clignotant), niveau de charge de la batterie 100 % (lorsque la charge est terminée et la batterie complètement chargée, le voyant reste allumé en vert de manière continue).
4. Ne mettez pas en marche le masseur Super Hit™ Mini de Witt pendant la charge.

Utilisation

1. Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position ON (Marche). L'appareil passe en mode veille.
2. Réglage de la vitesse : Appuyez brièvement sur le bouton de programmation  pour allumer l'appareil. L'appareil est programmé pour démarrer sur la vitesse 1. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de programmation  pour passer à la vitesse 2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de programmation  pour passer à la vitesse 3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de programmation  pour passer à la vitesse 4. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de programmation  pour passer à la vitesse 5. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de programmation  pour que l'appareil passe en mode veille.
3. Réglage manuel de la vitesse : Au cours de tous les programmes, vous pouvez maintenir le bouton  enfoncé pendant 0,5 seconde pour accéder au réglage manuel de la vitesse. La vitesse augmente en fonction de la durée où vous maintenez le bouton  enfoncé, et jusqu'à ce que vous atteigniez la vitesse maximale. Veillez à bien éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pour ne pas décharger la batterie.

Entretien, nettoyage, rangement et transport

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon doux.
2. Rangez l'appareil dans la mallette de rangement fournie, également lorsque vous vous déplacez.
3. Rangez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans son emballage d'origine après l'avoir nettoyé. Rechargez-le tous les six mois.
5. Cet appareil peut être utilisé dans une voiture, un train, un bateau ou un avion.
6. Cet appareil doit être calé pendant le transport pour éviter les vibrations, les chocs, les retournements et les chutes.

FR



Se démarque des appareils traditionnels

Le Super Hit™ Mini de Witt est fourni avec trois têtes de massage pour répondre à tous vos besoins.

Mini tête de massage Multizone (générale)

Tête de massage Multizone pour une meilleure stimulation des tissus conjonctifs. Adapté pour plusieurs groupes de muscles sur tout le corps.



Tête de massage des points de déclenchement

Une tête de massage unique pour masser en profondeur les points douloureux et les soulager un par un ! La tête de massage convient pour tout le corps.



Tête de massage pour tendons d'Achille

Une conception unique pour masser les tendons d'Achille et le dos. Recommandé par les entraîneurs et les masseurs.



RÉCLAMATION

Vous disposez d'un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d'achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la main d'œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d'utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates.

Ne sont pas couverts par la garantie :

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l'appareil.
- Les dommages de l'appareil liés à un incendie et/ou à l'eau et à l'humidité.
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n'est pas transporté dans un emballage approprié.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Le non-respect des consignes d'utilisation.
- Le montage du produit non conforme aux instructions.
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
- La batterie et toute autre pièce d'usure.

Dommages liés au transport

Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.

Demande de service après-vente injustifiée

Si après envoi du produit au service après-vente, il s'avère que la panne aurait pu être réparée par l'utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d'utilisation, le client devra payer les frais de service après-vente.

Achat professionnel

Un achat professionnel est défini par l'achat d'un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d'utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs. En cas d'achat professionnel, la garantie ne s'applique pas. En effet, ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit. Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service après-vente.

Sous réserve de faute d'impression.

Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l'annulation de la garantie.

AVERTISSEMENT : les massEURS Super Hit™ Master de Witt et Super Hit™ Mini de Witt ne sont pas conçus ou destinés pour être utilisés comme des dispositifs médicaux, ni pour remplacer des dispositifs médicaux. Les produits ne sont pas destinés à prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie ou tout autre état, même lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions. Les produits ne sont pas des dispositifs médicaux et ne sont pas destinés à diagnostiquer une maladie ou tout autre état, ni à guérir, atténuer, traiter ou prévenir une maladie. Consultez toujours votre médecin pour toute question d'ordre médical que vous pourriez avoir.

Les massEURS Super Hit™ Master de Witt et Super Hit™ Mini de Witt sont conçus pour soulager les tensions et les douleurs corporelles par la manipulation des tissus mous du corps. Si vous avez des questions d'ordre médical, veuillez consulter votre médecin immédiatement.