



Super HitTM Mini

Small size and strong power

Powered by **FITTOP**

WSHMINI

NL



INDHOLD

I	BELANGRIJKE INFORMATIE	4
II	STRUCTUUR VAN PRODUCT	7
III	SPECIFICATIES	8
IV	OPLADEN	9
V	BEDIENING.....	9
VI	ONDERHOUD, SCHOONMAKEN, OPSLAG EN TRANSPORT	10
VII	MESSAGEKOPPEN	11
VIII	GARANTIE EN SERVICE.....	13

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

Om het risico op functiefouten, elektrische schokken, letsel, brand, overlijden en materiaalschade te verminderen moeten alle instructies en waarschuwingen in de gebruikershandleiding van het Witts Super Hit™ Mini-massagepistool vóór gebruik worden doorgelezen.

Niet gebruiken

1. In het geval van spierschade dient u contact op te nemen met uw arts voordat u het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool gebruikt. Minderjarigen mogen het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
2. Gebruik dit apparaat niet op vochtige of beschadigde huid. Het kan worden gebruikt op kleding. Voorzichtig aandrukken en ongeveer 60 seconden op elk gebied bewegen.
3. Gebruik dit apparaat niet op de nek, knokkels en lichaamsdelen met weinig spieren. Uitsluitend gebruiken op de zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of onbehagen te veroorzaken.
4. Gebruik het apparaat niet bij blauwe plekken, pijn of onbehagen.
5. Geen onderdelen in de ventilatie-openingen in het apparaat plaatsen.
6. Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water door de ventilatie-openingen komt.
7. Het apparaat mag niet in de buurt van vuur of bronnen van hitte komen.
8. Verlies het apparaat niet en gebruik het niet met opzet verkeerd.

9. Het apparaat mag niet uit elkaar worden genomen.
10. Houd vingers, haren en andere delen van het lichaam weg van de as en de achterkant van de massagekop. Dit kan letsel veroorzaken.



Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool zonder dat de massagekop is bevestigd.



Raak dit onderdeel niet aan bij het starten van het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool wanneer de massagekop is bevestigd.

Waarschuwingen en herinneringen

1. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en bronnen van hitte. Houd de ventilatie-openingen vrij van stof en vuil.
2. Trek de oplader uit het apparaat wanneer het is opgeladen.
3. Het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool kan tijdens het laden niet worden gebruikt.
4. Gebruik dit apparaat volgens de instructies in deze handleiding.


5. Controleer nauwkeurig of het apparaat normaal kan worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

GEbruik IN DE VOLGENDE GEVALLEN HET APPARAAT NIET ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS (deze instructie betekent niet dat u het apparaat niet kunt gebruiken, maar wij raden aan om eerst een arts te raadplegen):

zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathologie of netvliesschade, gebruik van een pacemaker, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylitis, spierpijn in de rug of een stijve rug, recente chirurgische ingreep of spiraal, metalen stiften of platen of overige ernstige problemen in verband met uw gezondheid.

- Stille motortechniek zorgt voor een dynamische krachtbalans en daardoor een geluidsarme massage.
- De massagekoppen zorgen voor een comfortabele massage en verminderen pijn bij de botten.
- Oplaadbare lithiumbatterij.
- Compact handvat met comfortabele greep.
- Aanraakscherm.
- De ingebouwde batterij en het ergonomische design zorgen voor een goede greep.

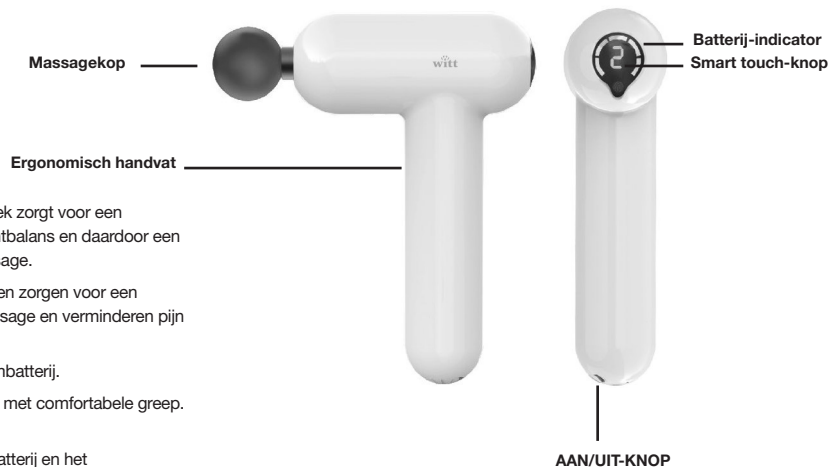

Witt Super Hit™ Mini-massagepistool met 3 verschillende massagekoppen



Multi part

Mini ronde mas-
sagekop

Trigger point

Mini knopenmas-
sagekop

Run & Jump

Mini achilles-
peesmassagekop

Bevestiging van massagekoppen:

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. U bevestigt de gewenste massagekop door de massagekop iets naar binnen te drukken en tegelijkertijd te draaien. Verwijder de massagekop door er lichtjes aan te draaien terwijl u het voorzichtig uitneemt. Kies de massagekop voor de prettigste massage.


Specificaties

Productnaam: Witt Super Hit Mini	Nominale spanning: 5V
Productmodel: WSHMINI	Vermogen: ca. 2000 mA
Gewicht: ca. 0,6 kg	Massagekoppen: 3 verschillende massagekoppen
Voeding: oplaadbare lithiumbatterij	Instellingen: 5 snelheden, handmatige snelheidsbediening

Opladen

1. Laad de batterij op voordat u het product in gebruik neemt. (Als het apparaat voldoende is opgeladen, is dit niet nodig.)
2. Sluit het ronde uiteinde van de kabel aan op het apparaat en laad het apparaat ia USB op.
3. Batterij-indicator: Batterijniveau < 25% (rood lampje knippert), batterijniveau < 50% (geel lampje knippert), batterijniveau < 75% (blauw lampje knippert), batterijniveau > 75% (groen lampje knippert), batterijniveau 100% (als het opladen is voltooid en de batterij volledig opgeladen is, brandt een groen lampje voortdurend).
4. Schakel het Witt Super Hit™ Mini-massagepistool niet tijdens het laden in.

Bediening


1. Schuif de aan/uit-knop naar ON. Het apparaat gaat over op stand-by.
2. Snelheidsinstelling: Druk kort op de instelknop  apparaat in te schakelen. De vooraf ingestelde snelheid van het apparaat is 1. Druk kort op de instelknop om de snelheid te verhogen naar 2. Druk nogmaals op de instelknop om de snelheid te verhogen naar 3. Druk nogmaals op de instelknop om de snelheid te verhogen naar 4. Druk nogmaals op de instelknop om de snelheid te verhogen naar 5. Als u nogmaals op de instelknop drukt, gaat het apparaat terug naar stand-by.
3. Handmatige snelheidsinstelling: Bij elke instelling kunt u de knop 0,5 seconde ingedrukt houden om over te gaan op de handmatige snelheidsinstelling. De snelheid wordt verhoogd in verhouding tot hoelang de knop ingedrukt blijft, totdat de max. snelheid is bereikt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer het niet in gebruik is, om te voorkomen dat de batterij leegloopt.

Onderhoud, schoonmaken, opslag en transport

1. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken en droog na met een zachte doek.
2. Bewaar het apparaat in de meegeleverde bewaartas, ook op reis.
3. Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plek.
4. Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet het na het schoonmaken worden bewaard in de originele verpakking en om de zes maanden worden opgeladen.
5. Dit apparaat is geschikt voor gebruik in de auto, in de trein, op de boot en in het vliegtuig.
6. Dit apparaat moet tijdens transport worden vastgezet om trillingen, botsingen, rollen en vallen te voorkomen.

Anders dan traditionele apparaten

De Witt Super Hit™ Mini heeft drie massagekoppen die ontworpen zijn om tegemoet te komen aan al uw behoeftes.

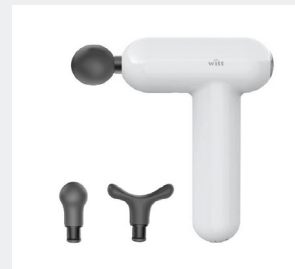

Mini multi part-massagekop (algemeen)

De Mini multi part-massagekop voor betere stimulering van bindweefsels. Geschikt voor verschillende spiergroepen in het gehele lichaam.



Trigger point-massagekop

Unieke massagekop voor diepere massage van knopen, die een voor een worden weggenomen. De massagekop is bedoeld voor het hele lichaam.



Achillespeesmassagekop

Uniek design voor het masseren van de achillespees en de rug. Aanbevolen door sporters en masseurs.



GARANTIE

Er geldt 2 jaar reclamatierecht voor uw nieuwe product bij fabricage- en materiaalfouten, geldig vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat materialen en werkuren. Bij servicecontact dient u de naam en het serienummer van het product op te geven. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje. Noteer eventueel de gegevens hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u ze bij de hand hebt. Zo kan de servicemonteur de juiste vervangende onderdelen sneller vinden.

De garantie geldt niet:

- Bij fouten en schade die niet zijn veroorzaakt door fabricage- en materiaalfouten
- Bij gebrekkig onderhoud, waaronder het schoonmaken van het product
- Bij brand en/of water- en vochtschade aan het product
- Bij transportschade, waarbij het product zonder de juiste verpakking is vervoerd
- Als er niet-originele vervangende onderdelen zijn gebruikt
- Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
- Als de installatie anders dan de instructie is uitgevoerd
- Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
- Voor batterijen of overige slijtstukken

Transportschade

Transportschade die wordt vastgesteld bij levering door de verkoper aan de klant, is een zaak tussen de klant en de verkoper. In gevallen waarin de klant zelf verantwoordelijk is voor het transport van het product, neemt de leverancier geen enkele verplichting op zich in verband met eventuele transportschade. Eventuele transportschade dient onmiddellijk en uiterlijk 24 na ontvangst van het product te worden gemeld. In andere gevallen wordt de eis afgewezen.

Ongegronde service

Als het product wordt ingestuurd voor service, en duidelijk wordt dat de klant de fout zelf had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de servicekosten.

Bedrijfsmatige aankoop

Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn.

In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

SERVICE

Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service'.

Onder voorbehoud van zetfouten.

De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan producten en/of letsel bij personen indien de veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

WAARSCHUWING: De Witt Super Hit™ Master en de Witt Super Hit™ Mini zijn niet ontworpen of bedoeld om te worden gebruikt als medische apparatuur of als vervanging daarvan. De producten zijn niet bedoeld voor het voorkomen, diagnosticeren of behandelen van ziektes of aandoeningen, ook niet bij gebruik volgens de aanwijzingen. De producten vormen geen medische apparatuur en zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren van ziektes of overige aandoeningen, en evenmin voor het genezen, verzachten, behandelen of voorkomen van ziekte. Neem bij eventuele medische vragen altijd contact op met een arts. De massagepistolen Witt Super Hit™ Master en Witt Super Hit™ Mini zijn bedoeld voor het verminderen van lichamelijke stress en pijn door zacht weefsel in het lichaam te manipuleren. Neem bij medische vragen altijd onmiddellijk contact op met een arts.